

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					
CH-8583 Sulgen +41 71 644 85 00 Belimed Sauter AG Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntheit an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verb. © Belimed Sauter AG, CH-Sulgen We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © Belimed Sauter AG, CH-Sulgen Nous réservons tous droits sur ce document et les informations qu'il contient. Reproduction, utilisation, divulgation à une tierce partie sans autorisation expresse est strictement interdite.															
		Zustand		Änderung		Datum		Name		Datum		Bearb.		29.01.2008	
														REB	
														BME	
														IEC204/EN 60204	
														2	
														3	
														Uniklinik Essen, Zellbiologie	
														PST 14-8-12 HS1 6050/6060 FIS, VAFI/KOST	
														4	
														5	
														6	
														7	
														8	
														Essen_2007_3_10980	
														Anzahl	
														47	
														Blatt	
														1	
														Inhalt	
														1	

ELEKTROSCHEMATA

Kunde: Uniklinik Essen, Zellbiologie

Anlage-Nr.: 10980

Norm: IEC204/EN 60204

Projektleiter: BME

Anschlussdaten:

Betriebsspannung: 3x400/230V 50Hz

Nennstrom/Leistung: 17.7 A / 7.5 kW

Steuerspannung: 24V DC

Vorsicherung: 25 A

Nennisolationsspannung: 1000V

Kurzschlussfestigkeit: 10kA


Schutzart 230/400V: IP53

Schutzart 24V: IP20

Netzsystem: TN-S



Belimed
Infection Control

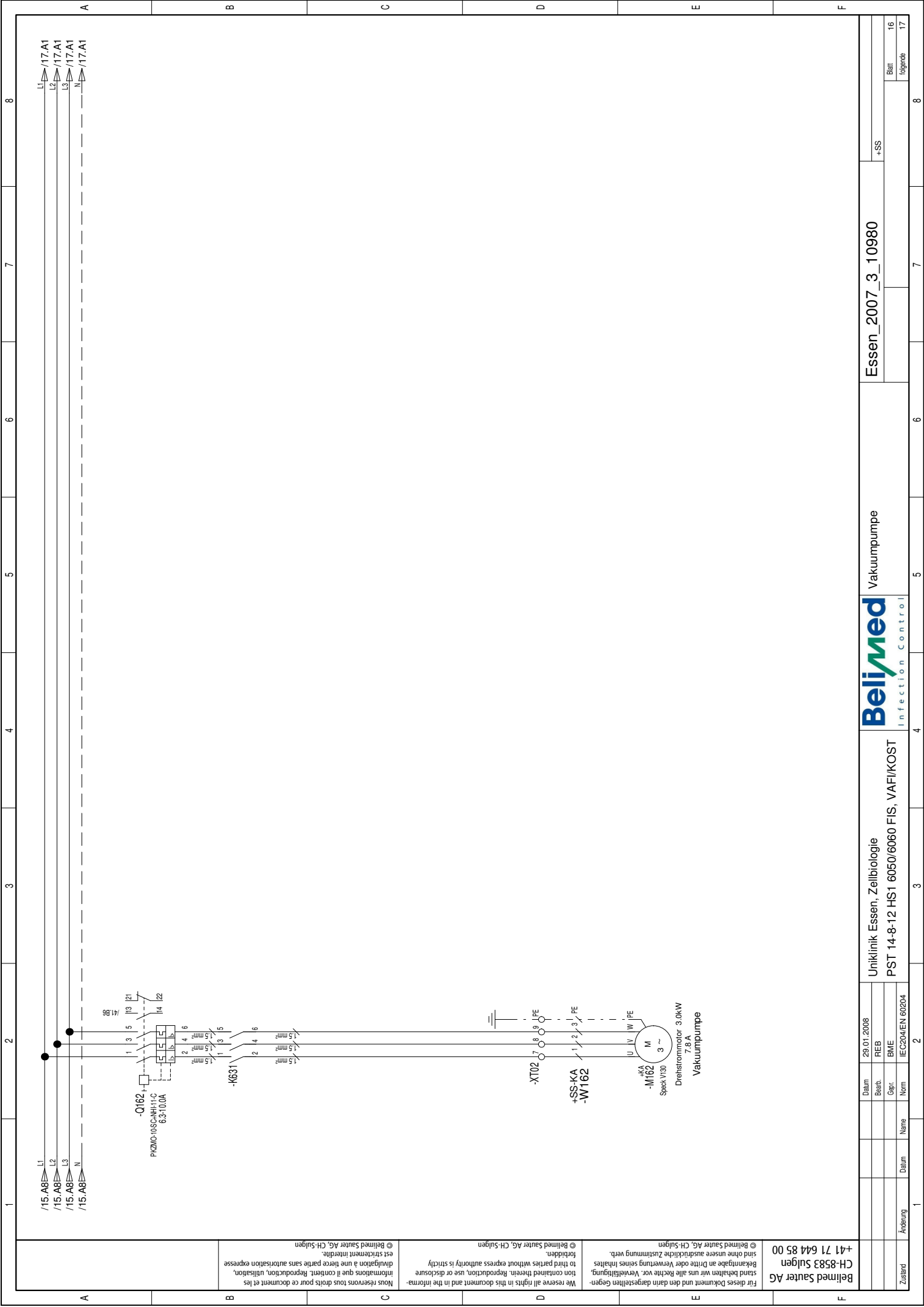

Essen_2007_3_10980

Vakuumpumpe

Uniklinik Essen, Zellbiologie
PST 14-8-12 HS1 6050/6060 FIS, VAFI/KOST

Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Gpr.	BME	REB	Datum	29.01.2008

+41 71 644 85 00

CH-8583 Sulgen
Belimed Sauter AG

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verb.

© Belimed Sauter AG, CH-Sulgen

© Belimed Sauter AG, CH-Sulgen
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

© Belimed Sauter AG, CH-Sulgen
Informations que il contient. Reproduction, utilisation, divulgation à une tierce partie sans autorisation expresse est strictement interdite.

© Belimed Sauter AG, CH-Sulgen
Nous réservons tous droits pour ce document et les informations qu'il contient. Reproduction, utilisation, divulgation à une tierce partie sans autorisation expresse est strictement interdite.

+SS

Beit

folgende

16

17

8

7

6

5

4

3

2

1




1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					
CH-8583 Sulgen +41 71 644 85 00		© Belimed Sauter AG, CH-Sulgen Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Belimed Sauter AG, CH-Sulgen, nicht zulässig.		© Belimed Sauter AG, CH-Sulgen We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.		© Belimed Sauter AG, CH-Sulgen Nous réservons tous droits pour ce document et les informations qu'il contient. Reproduction, utilisation, divulgation à une tierce partie sans autorisation expresse est strictement interdite.									
Zustand		Änderung		Datum		Name		Norm		IEC204/EN 60204		PST 14-8-12 HS1 6050/6060 FIS, VAFI/KOST		Uniklinik Essen, Zellbiologie	
Datum		29.01.2008		RFB		BME		IEC204/EN 60204		PST 14-8-12 HS1 6050/6060 FIS, VAFI/KOST		Uniklinik Essen, Zellbiologie		Belimed Infection Control	
Beauf.		RFB		BME		IEC204/EN 60204		PST 14-8-12 HS1 6050/6060 FIS, VAFI/KOST		Uniklinik Essen, Zellbiologie		Belimed Infection Control		Drucker	
+SS		Essen_2007_3_10980		Essen_2007_3_10980		Essen_2007_3_10980		Essen_2007_3_10980		Essen_2007_3_10980		Essen_2007_3_10980		Essen_2007_3_10980	
Blatt		35		35		35		35		35		35		35	
folgende		36		36		36		36		36		36		36	


Steckdose bauseitig

HP OfficeJet K5500TN
Ethernet-RJ45
+EXT
-P357

Crossover RJ45 20.0m
-W357
+EXT

Ethernet
92.E2

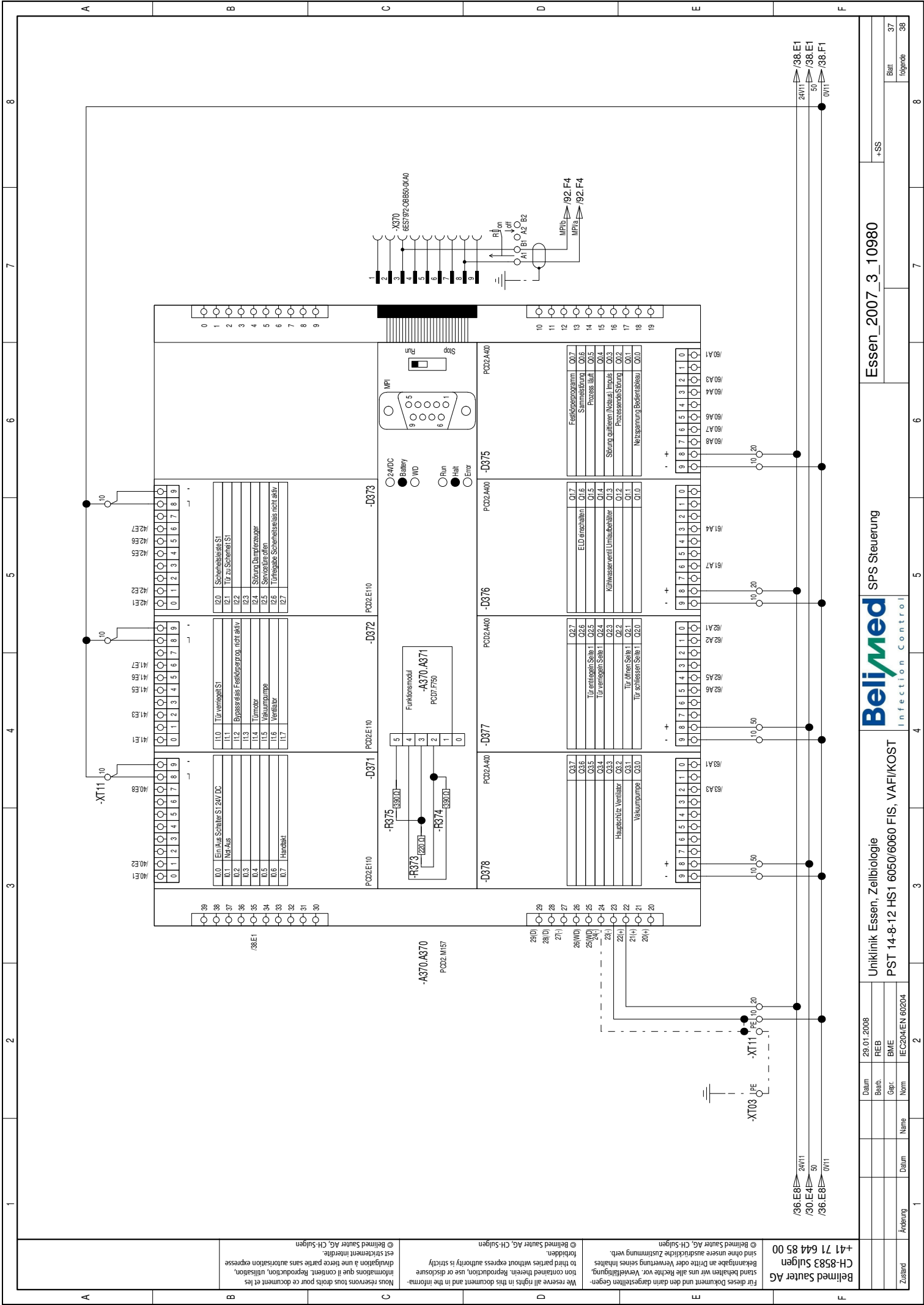

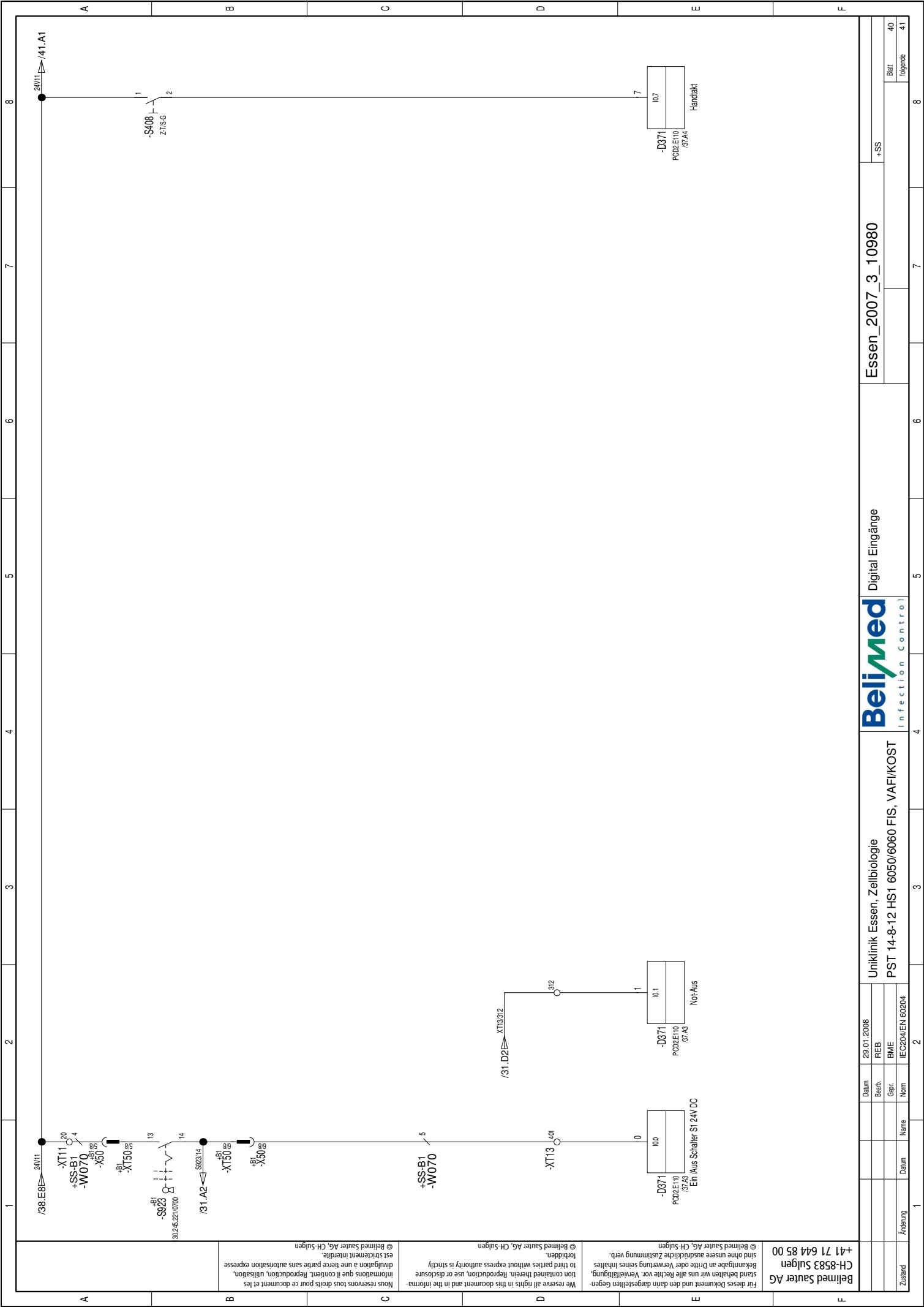


Uniklinik Essen, Zellbiologie
PST 14-8-12 HS1 6050/6060 FIS, VAFI/KOST

Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Gpr.	Bereit.	Datum
							29.01.2008
							RFB
							BME
							IEC204/EN 60204


Essen_2007_3_10980

+SS	Blatt	40
	folgende	41

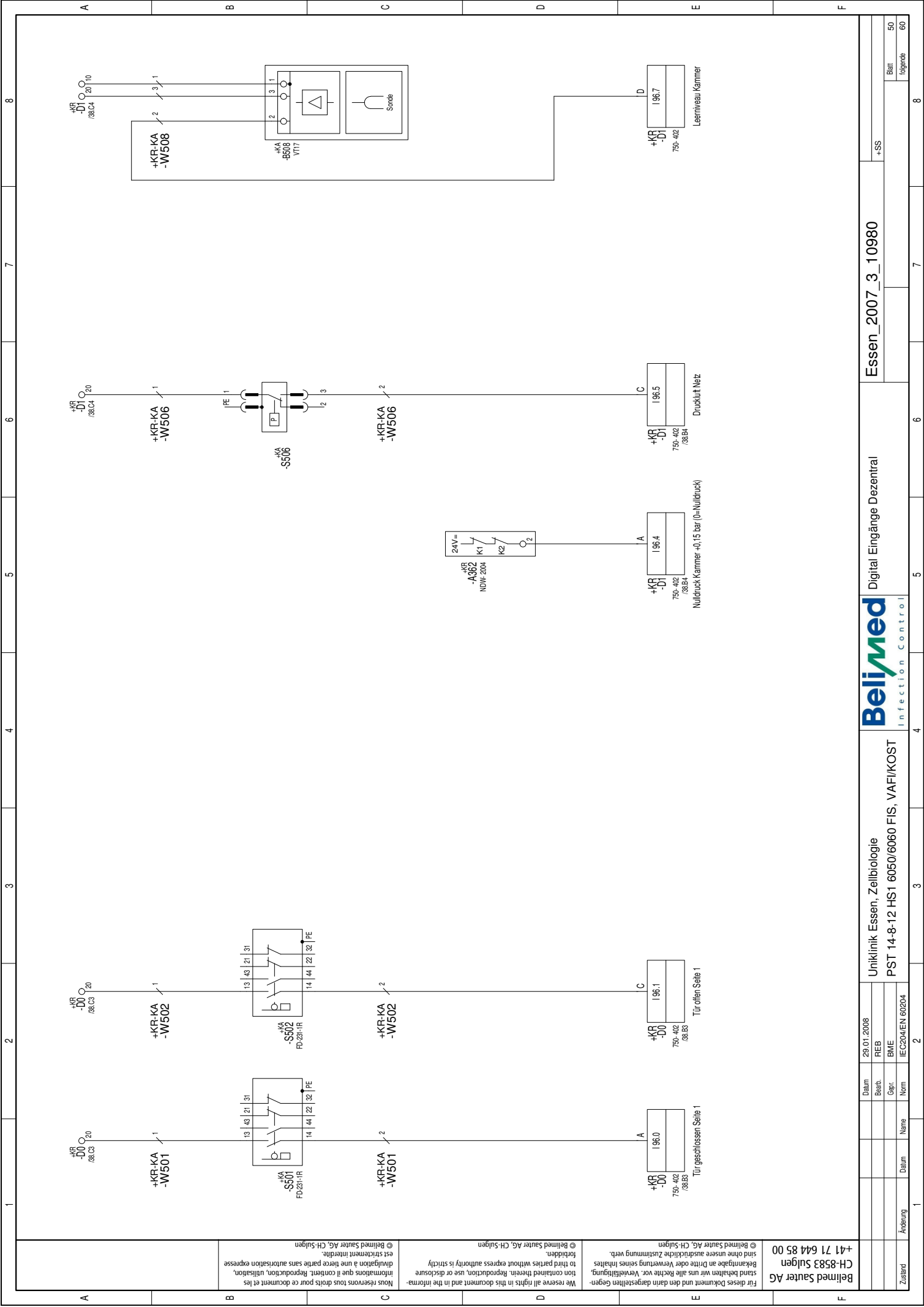





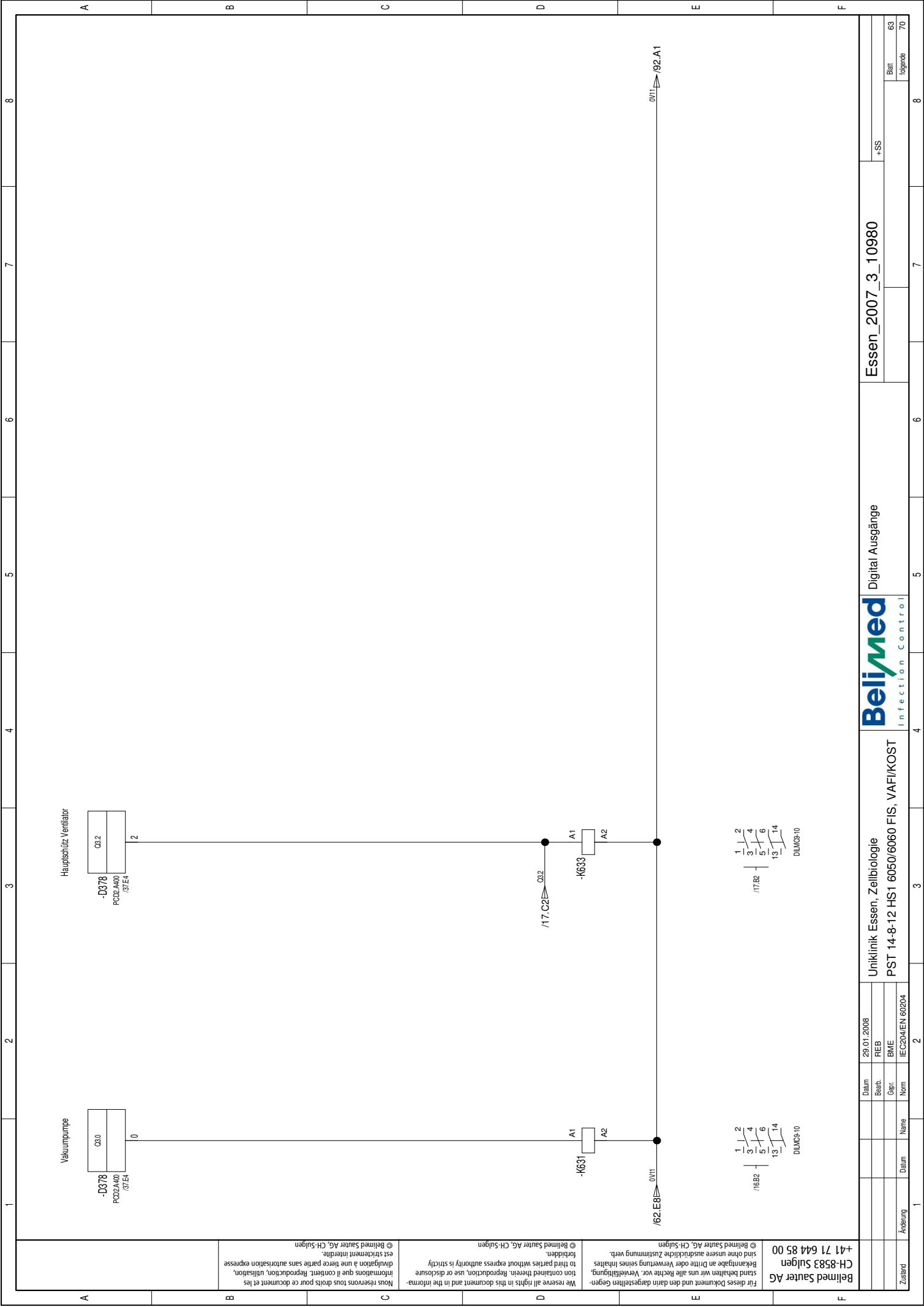


Uniklinik Essen, Zellbiologie
PST 14-8-12 HS1 6050/6060 FIS, VAFI/KOST

Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	IEC204/EN 60204


Datum	29.01.2008
Beauf.	REB
Gpr.	BME

Essen_2007_3_10980

+SS	Blatt	63
	folgende	70

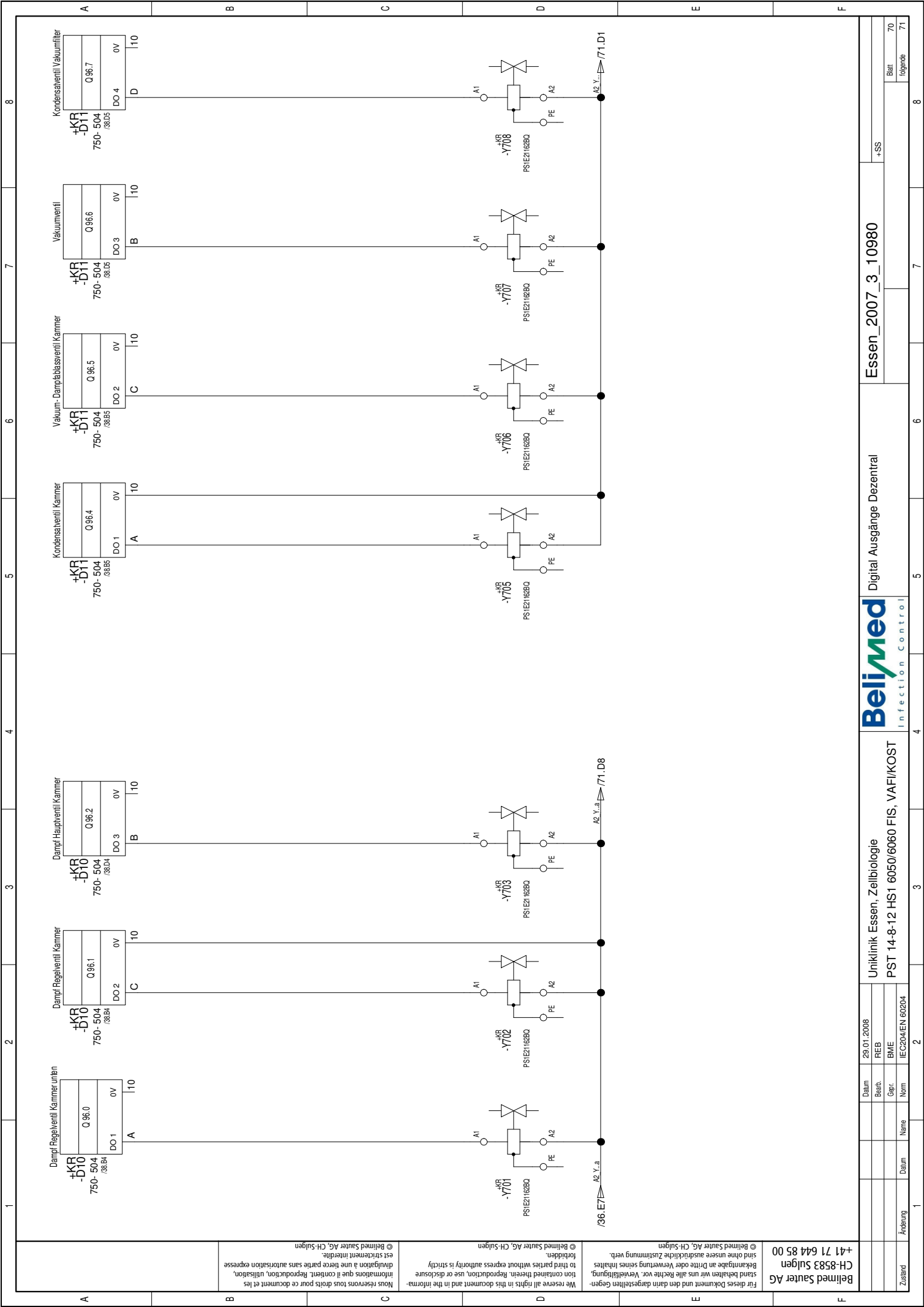

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

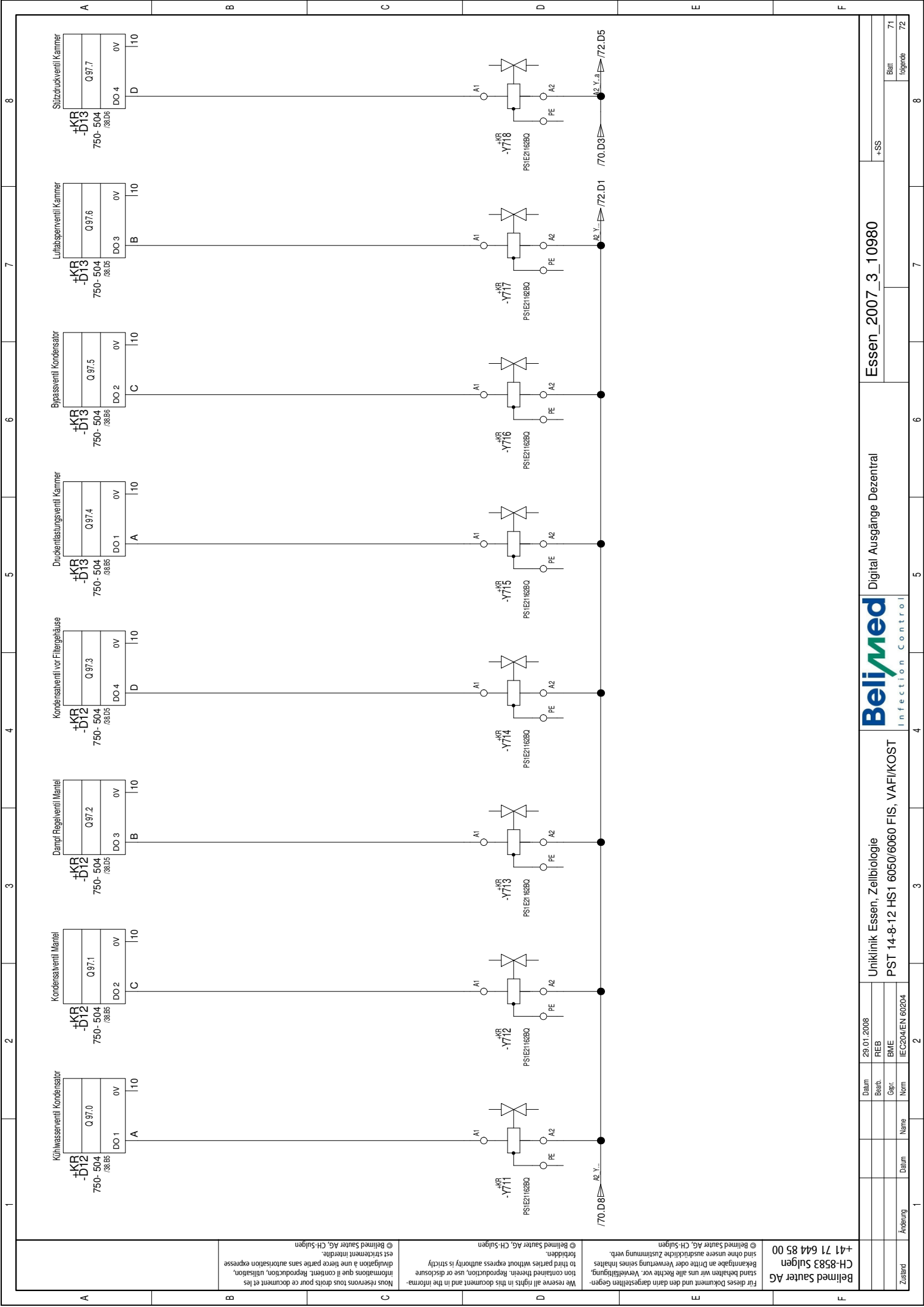

Digital Ausgänge Dezentral

Essen_2007_3_10980

Uniklinik Essen, Zellbiologie
PST 14-8-12 HS1 6050/6060 FIS, VAFI/KOST

Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Gpr.	BME	REB	Datum	29.01.2008


+41 71 644 85 00	CH-8583 Sulgen	Belimed Sauter AG
------------------	----------------	-------------------


Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Belimed Sauter AG, CH-Sulgen


We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. Belimed Sauter AG, CH-Sulgen


Nous réservons tous droits dans le document et les informations qu'il contient. Reproduction, utilisation, divulgation à une tierce partie sans autorisation expresse est strictement interdite. Belimed Sauter AG, CH-Sulgen

© Belimed Sauter AG, CH-Sulgen

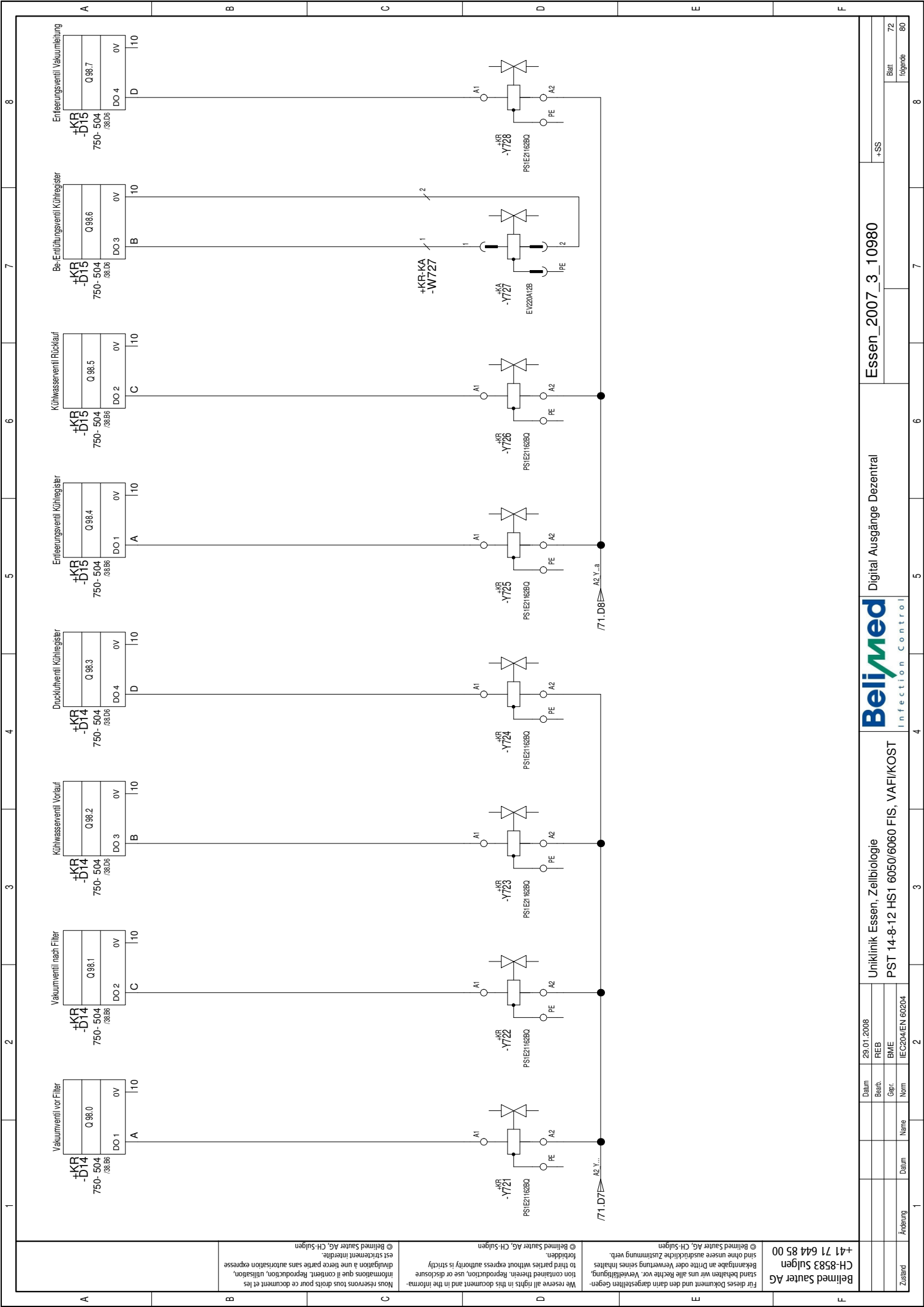


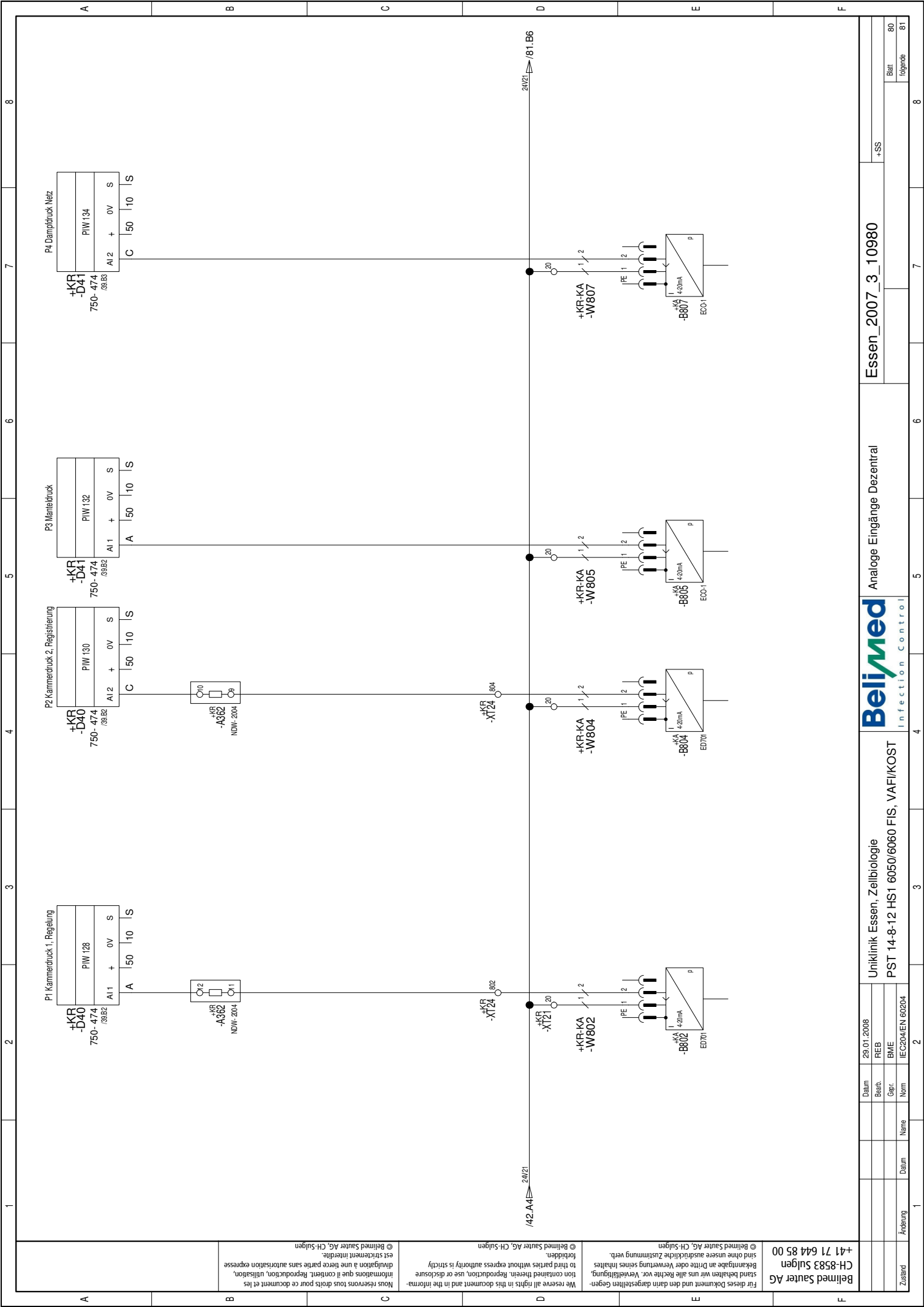

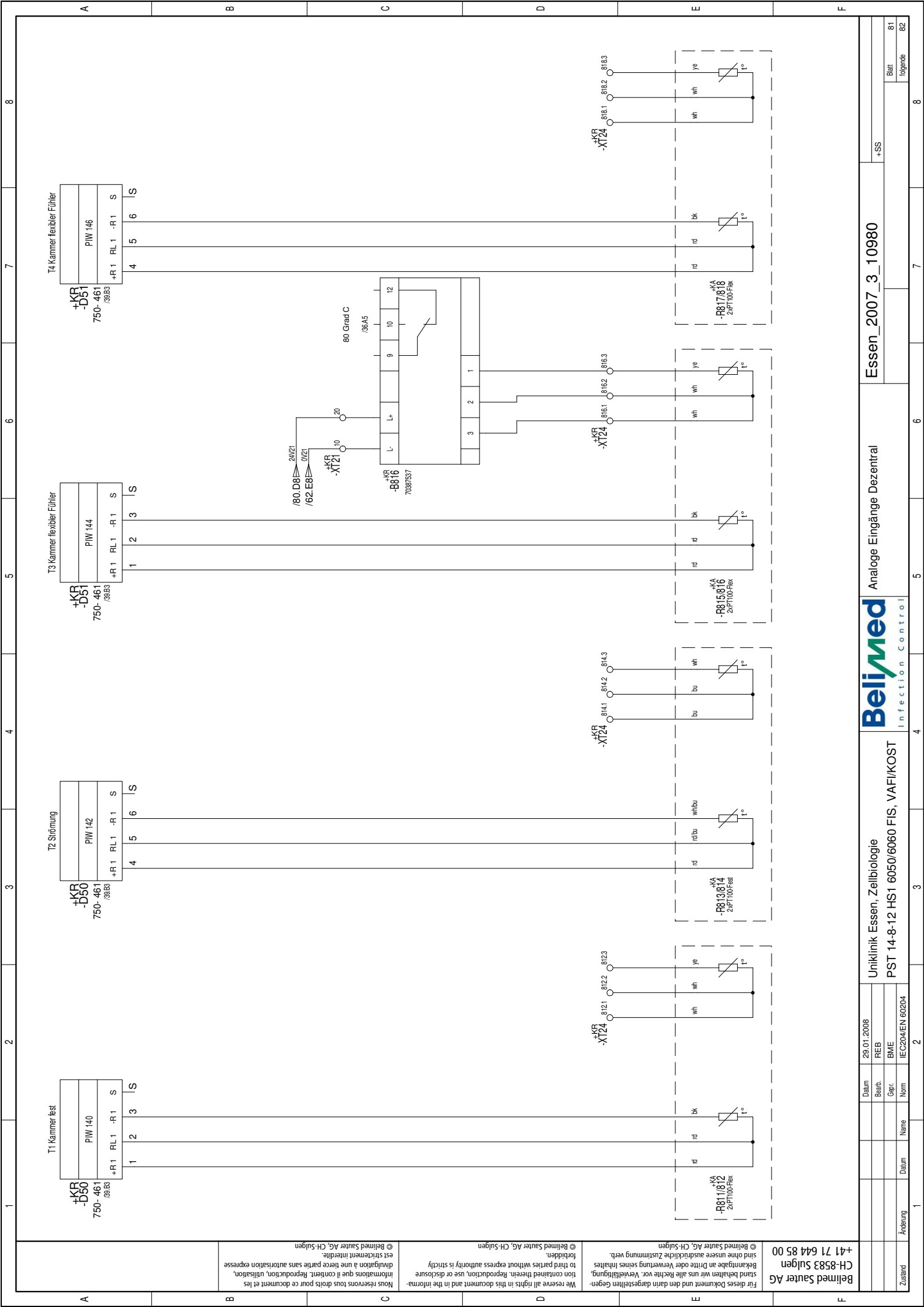

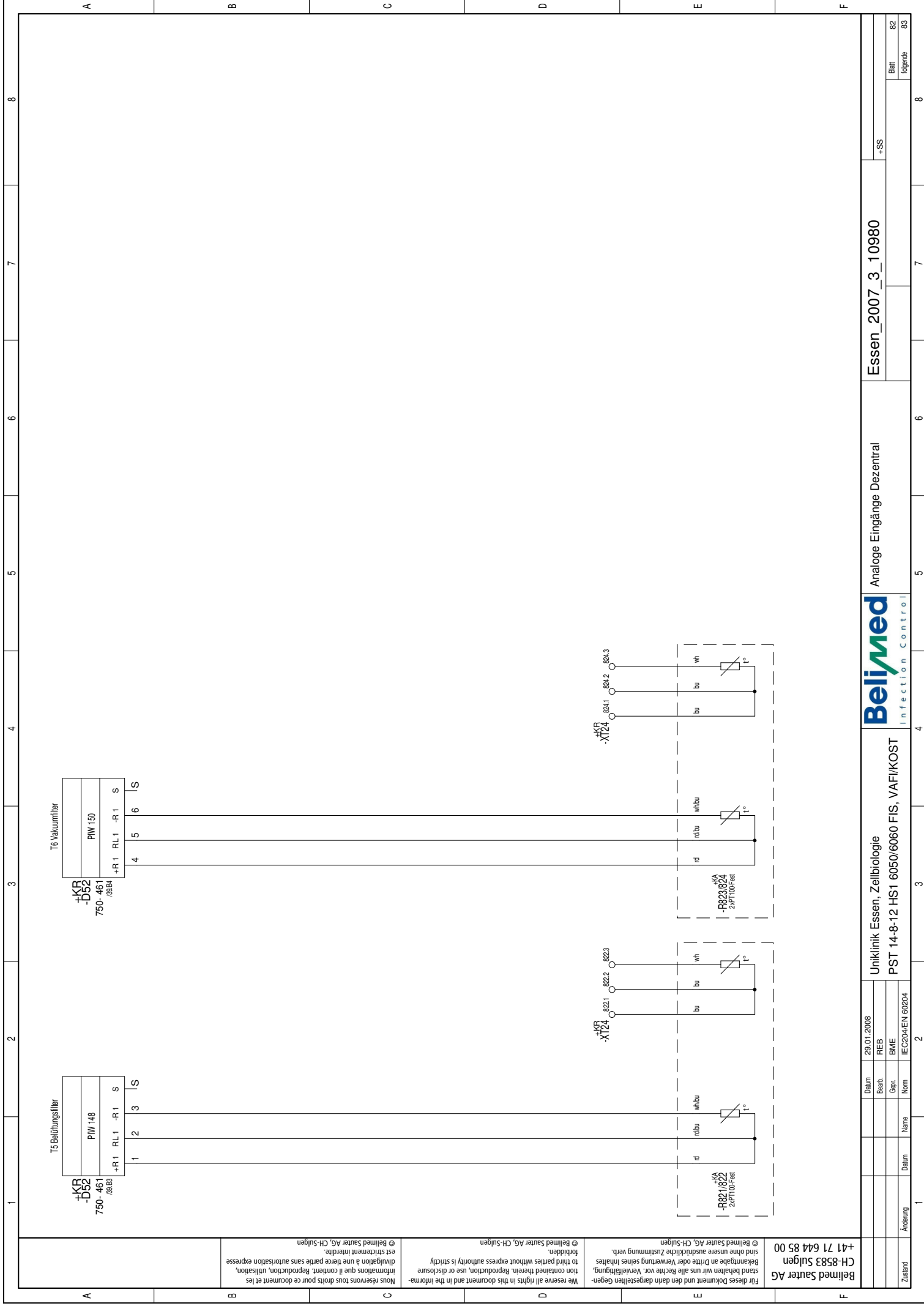

Belimed Sauter AG CH-8583 Sulgen +41 71 644 85 00		29.01.2008 REB BME IEC204/EN 60204		Uniklinik Essen, Zellbiologie PST 14-8-12 HS1 6050/6060 FIS, VAFI/KOST		Belimed Infection Control		Reserve Kabeladern, Abschirmung		Essen_2007_3_10980		+SS		Blatt 99 folgende 105	
Zustand		Änderung		Datum		Name		Norm		Gepr.		Beib.		Datum	

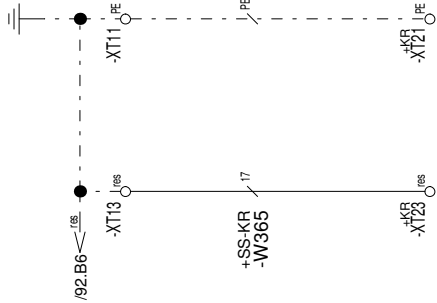

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kabelliste: Essen_2007_3_10980

		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+SS-B1	-W070	TDC-FLEX-6LPE0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT13	res		1	-X50	2		
-XT11	40		2	-X50	3		
-XT11	10		3	-X50	4		
-XT11	20		4	-X50	5		
-XT13	401		5	-X50	6		
-XT13	310		6	-X50	7		
-XT11	PE		PE	-X50	8		
		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+SS-KA	-W154	NYSU-J-3LPE1			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT02	1		1	-M154	U		
-XT02	2		2	-M154	V		
-XT02	3		3	-M154	W		
-XT02	PE		PE	-M154	PE		
		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+SS-KA	-W162	NYSU-J-3LPE1.5			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT02	7		1	-M162	U		
-XT02	8		2	-M162	V		
-XT02	9		3	-M162	W		
-XT02	PE		PE	-M162	PE		
		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+SS-KA	-W172	NYSU-J-3LPE1.5			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT02	10		1	-M172	U		
-XT02	11		2	-M172	V		
-XT02	12		3	-M172	W		
-XT02	PE		PE	-M172	PE		

Kabelliste: Essen_2007_3_10980

			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+SS-KR	-W365	TDC-FLEX-17LPE0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT11	20		1	-XT21	20		
-XT11	10		2	-XT21	10		
-XT11	20		3	-X381	20		
-XT11	10		4	-X381	10		
-XT11	50		5	-X382	50		
-A364	7		6	-XT22	363		
-A364	5		7	-XT22	364		
-A364	6		8	-XT22	365		
-A364	21		9	-XT22	366		
-A364	9		10	-XT22	411		
-XT13	422		11	-XT22	422		
-XT13	614		12	-XT23	614		
-XT13	620		13	-XT22	620		
-XT13	621		14	-XT22	621		
-XT13	625		15	-XT23	625		
-A364	15		16	-XT23	626		
-XT13	res		17	-XT23	res		
-XT11	PE		PE	-XT21	PE		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+SS-KR	-W380	Profibuskabel			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-A370.A371	36		ws	-X380	A1		
-A370.A371	37		bn	-X380	B1		
-A370.A371	35		SH1		{4}		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W411	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT21	20		1	-S411	1		
-XT22	411		2	-S411	3		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W422	TDC-FLEX-4L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT21	20		1	-S422	11		
-XT22	422		2	-S422	12		
-XT22	366		3	-S422	21		
-XT22	423		4	-S422	22		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+SS-KA	-W426	TDC-FLEX-4L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT11	20		1	-S426	13		
-XT13	426		2	-S426	14		
-XT13	427		3	-S426	21		
-XT13	428		4	-S426	22		

Kabelliste: Essen_2007_3_10980

			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W501	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-D0	20		1	-S501	13		
-D0	A		2	-S501	14		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W502	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-D0	20		1	-S502	13		
-D0	C		2	-S502	14		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W506	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-D1	20		1	-S506	1		
-D1	C		2	-S506	3		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W508	TDC-FLEX-3L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-D1	10		1	-B508	1		
-D1	D		2	-B508	2		
-D1	20		3	-B508	3		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W614	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT23	614		1	-Y614	1		
-XT21	10		2	-Y614	2		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W621	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT22	620		1	-S620	21		
-XT22	621		2	-S621	22		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W625	TDC-FLEX-3L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT21	10		1	-Y625	A		
-XT23	625		2	-Y625	B		
-XT23	626		3	-Y625	C		
			Kabel	Typ			Länge (mm)
		+KR-KA	-W727	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-D15	B		1	-Y727	1		
-D15	10		2	-Y727	2		

Kabelliste: Essen_2007_3_10980

		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+KR-KA	-W802	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT21	20		1	-B802	1		
-XT24	802		2	-B802	2		
		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+KR-KA	-W804	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT21	20		1	-B804	1		
-XT24	804		2	-B804	2		
		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+KR-KA	-W805	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT21	20		1	-B805	1		
-D41	A		2	-B805	2		
		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+KR-KA	-W807	TDC-FLEX-2L0.75			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT21	20		1	-B807	1		
-D41	C		2	-B807	2		
		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+SS-B1	-W900	Profibuskabel			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-X370	A1		ws	-X900	A1		
-X370	B1		bn	-X900	B1		
	{4}		SH1				
		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+SS-ELD	-W980	TDC-FLEX-6LPE1			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT11	10		1	-A222/X2	6		
-XT11	20		2	-A222/X2	7		
-XT13	617		3	-A222/X2	8		
-XT13	604		4	-A222/X2	10		
-XT13	425		5	-A222/X2	9		
			6				
			PE				
		Kabel	Typ			Länge (mm)	
		+SS-EXT	-W999	NYSU-J-4LPE4			
Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Ader	Betriebsmittel	Anschlu.	Anschlagteil	Länge (mm)
-XT01	1		1	-Q101	2		
-XT01	2		2	-Q101	4		
-XT01	3		3	-Q101	6		
-XT01	N		4	-Q101	N		
-XT01	PE		PE	-Q101	PE		