

ZYKLUSZEIT

01:04:01

H : MIN : SEK

STERILISATIONSDAUER

5:00

STERILISATION TEMP.

135.0 / 135.5

MIN / MAX °C

PROGRAMM

Instrumente 134°C

Nr. 1 / PR: 07.03.2018 SW: 103

BENUTZER

User

PROZESSDATEN

Uhrzeit	Proz.zeit	Phase	T2 °C	T3 °C	P2 mbar
07:49:02	0:02	1. Vorvakuum	62.3	56.1	1022
07:51:44	2:44	1. Druck	64.3	52.2	85
07:52:50	3:50	2. Vorvakuum	62.7	51.1	825
07:54:42	5:42	2. Druck	73.8	49.1	104
07:55:46	6:46	3. Vorvakuum	92.2	88.1	832
07:58:00	9:00	3. Druck	79.2	47.8	105
07:59:05	10:05	4. Vorvakuum	92.7	93.4	832
08:01:11	12:11	4. Druck	81.7	52.5	106
08:02:34	13:34	Luftdruck erreicht	99.0	99.6	1038
08:03:47	14:47	5. Vorvakuum	116.7	117.1	1854
08:04:34	15:34	5. Druck	103.2	103.9	1108
08:05:36	16:36	6. Vorvakuum	116.4	116.9	1820
08:06:23	17:23	6. Druck	104.3	104.7	1105
08:07:25	18:25	7. Vorvakuum	116.6	117.1	1819
08:08:11	19:11	7. Druck	105.8	105.4	1106
08:09:16	20:16	Vorvakuum	117.0	117.3	1845
08:10:02	21:02	Druck	104.4	105.5	1105
08:11:07	22:07	Vorvakuum	116.9	117.2	1839
08:11:53	22:53	Aufheizen	105.4	105.1	1101
08:15:28	26:28	Sterilisation	134.6	134.7	3090
08:16:28	27:28	Sterilisation	135.1	135.1	3106
08:17:28	28:28	Sterilisation	135.0	135.1	3115
08:18:28	29:28	Sterilisation	135.0	135.1	3117

Uhrzeit	Proz.zeit	Phase	T2 °C	T3 °C	P2 mbar
08:24:51	35:51	Trocknung	99.2	104.9	99
08:35:51	46:51	Belueften	32.2	64.1	42
08:37:11	48:11	Halten Belueften	32.4	60.9	811
08:38:42	49:42	Nachvakuum	32.8	57.5	807
08:40:32	51:32	Trocknung	39.7	51.4	104
08:43:32	54:32	Belueften	26.3	43.9	37
08:44:51	55:51	Halten Belueften	26.6	43.6	811
08:46:22	57:22	Nachvakuum	27.7	42.5	805
08:48:13	59:13	Trocknung	60.4	40.5	104
08:51:13	62:13	Belueften	23.0	39.5	39
08:53:03	64:03	Programm Ende	24.6	39.6	970

OPERATOR

User

CHARGE


freigegeben

☐ ja

☐ nein

UNTERSCHRIFT

Prozessverlauf - Messwerte

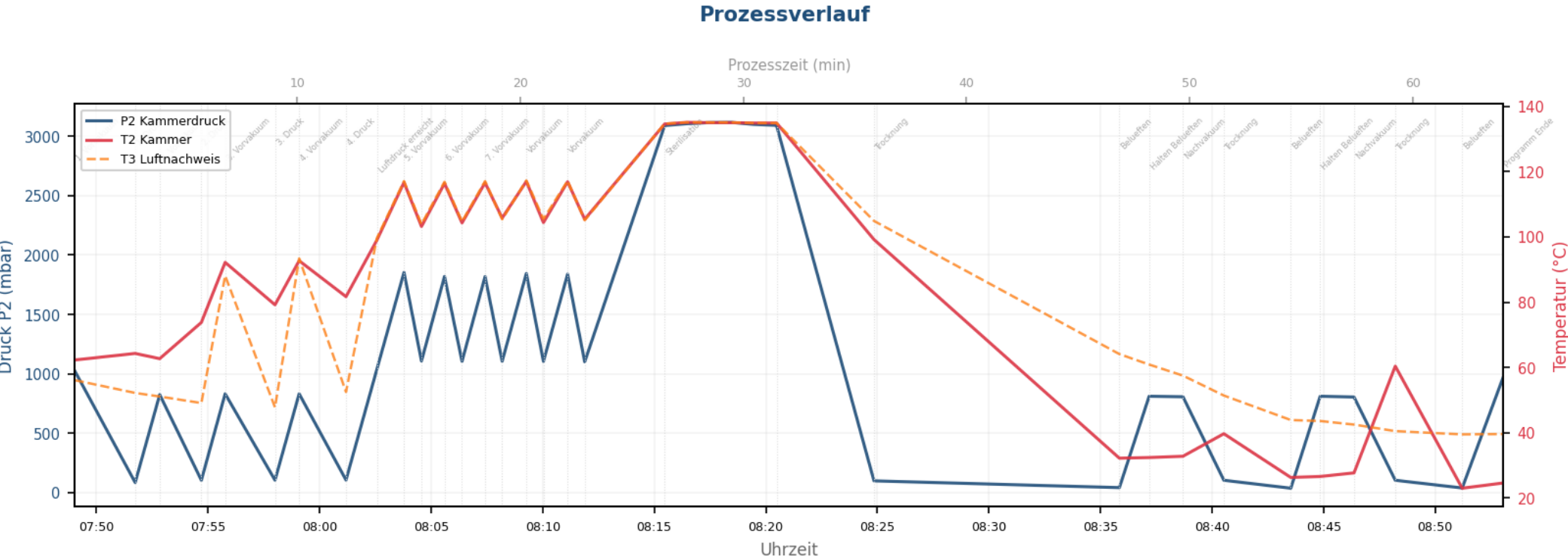

HANDSCHRIFTLICHE DOKUMENTATION (NOTFALLKONZEPT)

STERILISIERTE CONTAINER / SIEBE / INSTRUMENTE

Nr.	Container / Sieb / Instrument	Menge	SIE-Nr.	Indikator OK	Bemerkung
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

STERILGUT-FREIGABE

☐ Freigegeben ☐ Nicht freigegeben

DATUM / UNTERSCHRIFT: